

SOAP-AI

操作マニュアル

2026/1/21

(株)オプテック 運用技術部

内容

1. 概要	1
2. 操作	1
2.1. カルテ	1
2.2. カルテフォルダツールウィンドウ	4
2.3. さくっと One	5
2.3.1. SOAP コメントを作成する	5
2.3.2. カルテへ挿入	7
2.3.3. 作成した SOAP コメントを削除する	9

1. 概要

本ドキュメントでは、Opt.one3 で使用可能な「SOAP-AI」の操作について記載します(条件:ゴールドプラン以上のみ)。

さくっと One を使用している場合、さくっと One でも SOAP-AI を使用できます。

2. 操作

2.1. カルテ

(ア) [SOAP-AI]ボタンをクリックします。

※ [SOAP-AI]は<S>、<O>、<A>、<P><主訴>入力画面で表示されます。

The screenshot shows the SOAP-AI interface. The top toolbar includes buttons for '開じる', '戻る', '次項目', '完了', '文章入力', '部位入力', '問診書から転記', '追加項目切替', 'SOAP-AI' (highlighted with a red box), '新規入力', and 'ショートカット'. The main area is divided into three sections: a left list of categories (1. (選択しない), 2. 未分類, 3. 歯周, 4. 歯, 5. プリッジ, 6. 義歯, 7. 歯式なし, 8. その他), a central input area with a numeric keypad and a '改行' button, and a right panel for patient information and SOAP notes. The right panel includes fields for '部位', '病名', '現症', '検査', '問題リスト・考察', '初期治療計画', 'A', 'P', and '処置'.

(イ) 左側に SOAP 挿入したい内容をテキスト入力します。

3秒ごとに AI が要約し、SOAP 他に分類した結果が右側へ表示されます。

※ 「。」や「改行」で区切るようにすると精度が向上します。

The screenshot shows the SOAP-AI interface with three callouts explaining the workflow:

- ① テキスト or 音声入力: Points to the input area where text is entered.
- ② AI が要約: Points to the summary area where the AI summarizes the input.
- ③ AI がそれぞれに分類する: Points to the classification area where the AI classifies the input into SOAP categories.

The input area contains the text: 「う蝕は歯髄まで達している様子。抜髄、その後FMCにて補綴の予定だが、全顎に歯周炎症状があるため疼痛緩解後、歯周病検査の予定。遠心から咬合面に深いう蝕。エアーにて疼痛、C3慢性潰瘍性歯髄炎。打診痛なし。息子ときました。」

The summary area contains the text: 【う蝕の進行状況】
歯髄まで達しているう蝕が見られた。
遠心から咬合面に深いう蝕があった。
【診断と今後の治療方針】
C3慢性潰瘍性歯髄炎と診断された。
エアーにて疼痛があった。
打診痛はなかった。
抜髄後、FMCにて補綴する予定である。
全顎に歯周炎症状があるため、疼痛緩解後に歯周病検査を実施する予定である。
【来院状況】
息子さんと一緒に来院された。

The classification area shows the following categories and their corresponding text:


- S: 歯髄まで達する深い遠心から咬合面のう蝕あり。エアーにて疼痛を認めるが、打診痛はなし。全顎に歯周炎症状...
- O: C3慢性潰瘍性歯髄炎と診断。
- A: 抜髄後FMCにて補綴予定。疼痛緩解後に歯周病検査を実施予定。
- P: 息子さんと一緒に来院。
- 他:

※ Windows11 の場合、[音声入力]が使用できます(PC ヘマイク接続が必要)。
Windwos10 の場合、[音声入力]ボタンはグレーアウトします。



(ウ) 分類結果を確認し、[カルテ転記]をクリックします。

※ 文章が画面内に収まらない場合、折り返しされずに見切れます。マウスカーソルを合わせると、全文がツールチップ表示されます。

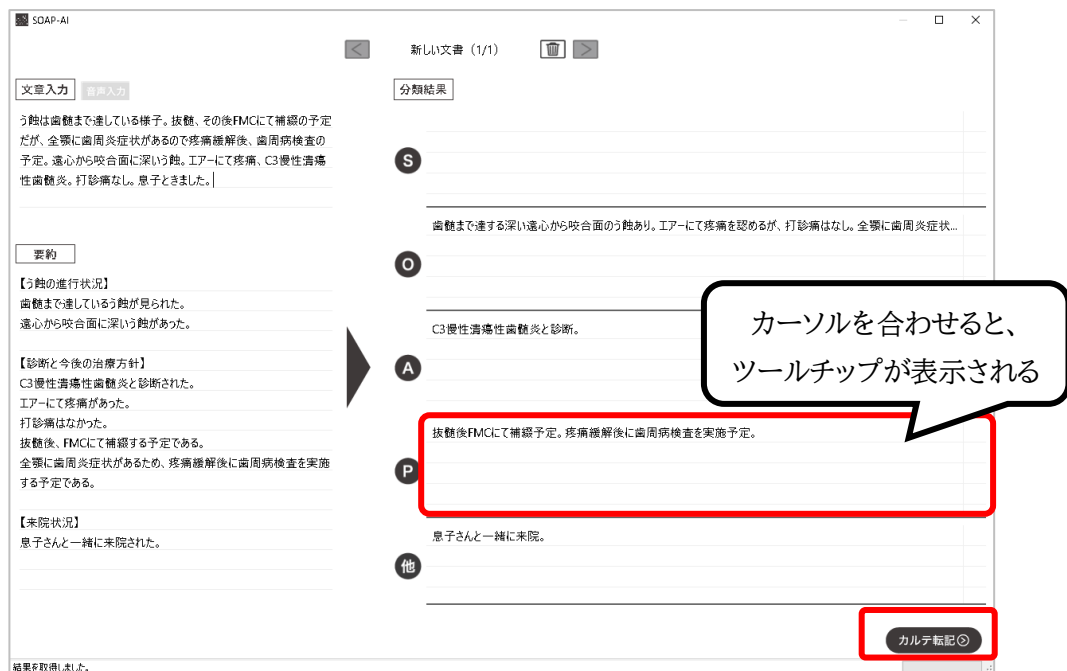

(エ)それぞれの分類に転記されます。

※ SOAP-AI 起動前に内容を入力していた場合、その後ろに挿入されます。

SOAP-AI 画面	転帰先
S	S/主訴
O	O/現症
A	A/問題リスト・考察
P	P/初期治療計画
他	コメント

The screenshot shows the SOAP-AI software interface. The top menu bar includes options like '閉じる' (Close), '戻る' (Back), '次項目' (Next Item), '完了' (Complete), '文章入力' (Text Input), '部位入力' (Part Input), '問診表から転記' (Transfer from Questionnaire), '追加項目切替' (Switch Additional Items), 'SOAP-AI' (SOAP-AI), '新規入力' (New Input), and 'ショートカット' (Shortcut). The main area displays a dental chart with a list of symptoms: '1. 選択しな', '2. 未分類', '3. 歯痛'. A red line highlights the text '<昨日から> <上の前歯が> <少し痛い。> う蝕は歯髄まで達している様子。入院中に歯が痛く。'. Two callouts are present: one pointing to the text input area labeled 'AI 起動前に 入力したコメント' (Comment entered before AI activation), and another pointing to the text input area labeled 'SOAP-AI で 挿入したコメント' (Comment inserted by SOAP-AI). The bottom status bar shows function keys F1 through F12, with F4 labeled '文章入力', F6 labeled '部位入力', F8 labeled 'クリア', F9 labeled '新規入力', F10 labeled '戻る', F11 labeled '次項目', and F12 labeled '完了'.


2.2. カルテフォルダツールウィンドウ

カルテでのみ、過去に保存した SOAP-AI の履歴を確認できます。編集はできません。開いた際、SOAP-AI を保存した日にカルテ移動します。

Opt.one/さくっと One 関係なく、すべての SOAP-AI 履歴を確認できます。

上部の削除ボタンから、削除が可能です。

同日に複数保存した場合、上部「<」「>」で移動できます。

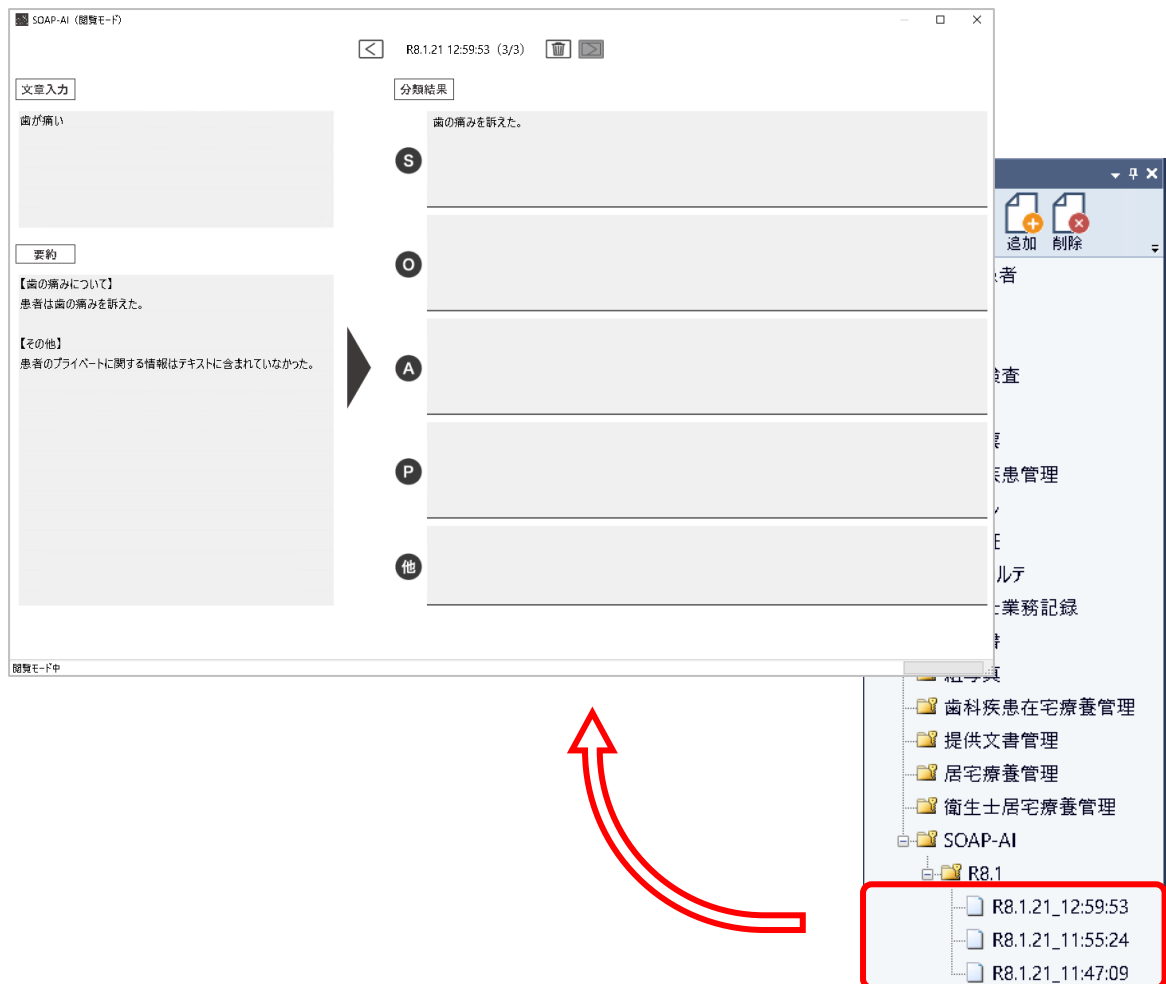


2.3. さくっと One

2.3.1. SOAP コメントを作成する

(ア) 左側のメニュー一覧から[SOAP-AI]をタップします。

(イ) 新しく作成する場合は右上[+]を、作成済みの内容を編集する場合は一覧から選択してタップします。

※ Opt.one で保存した内容も一覧に表示されます。

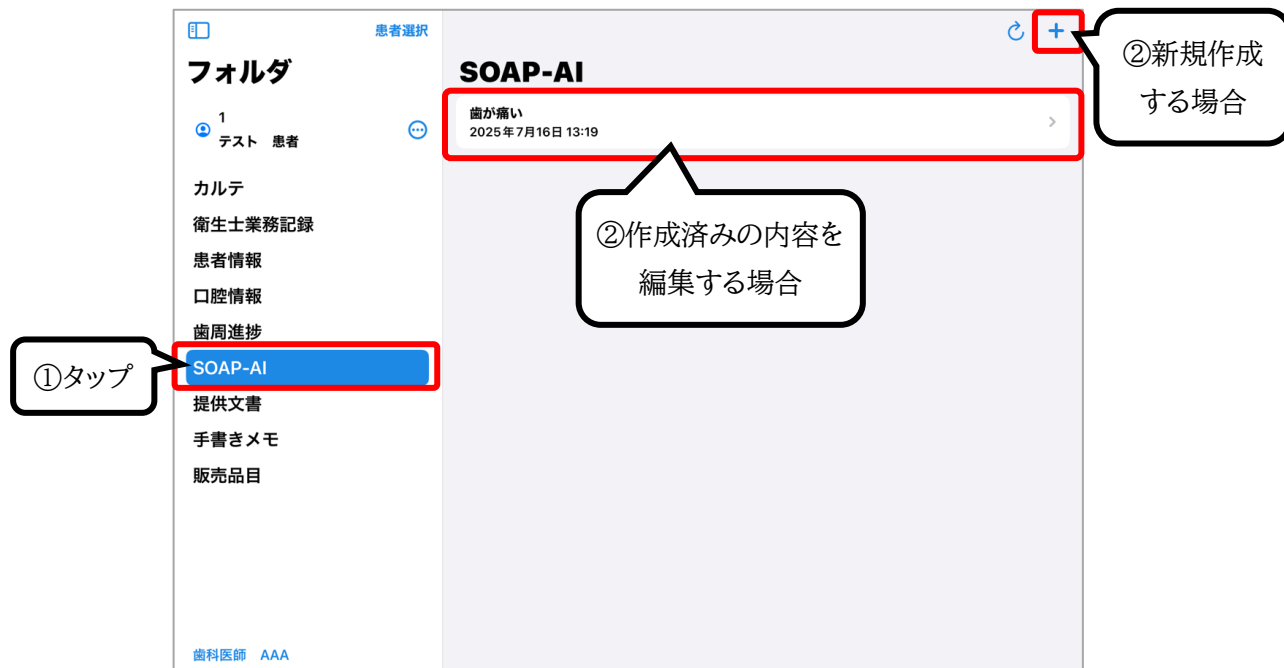


(ウ) 録音ボタンをタップして録音を開始・終了します。

音声は文字起こしされ、AI による要約と分類が行われます。



(エ) 内容を確認し、修正があれば分類をタップして編集し、[確定]で変更内容を保存します。

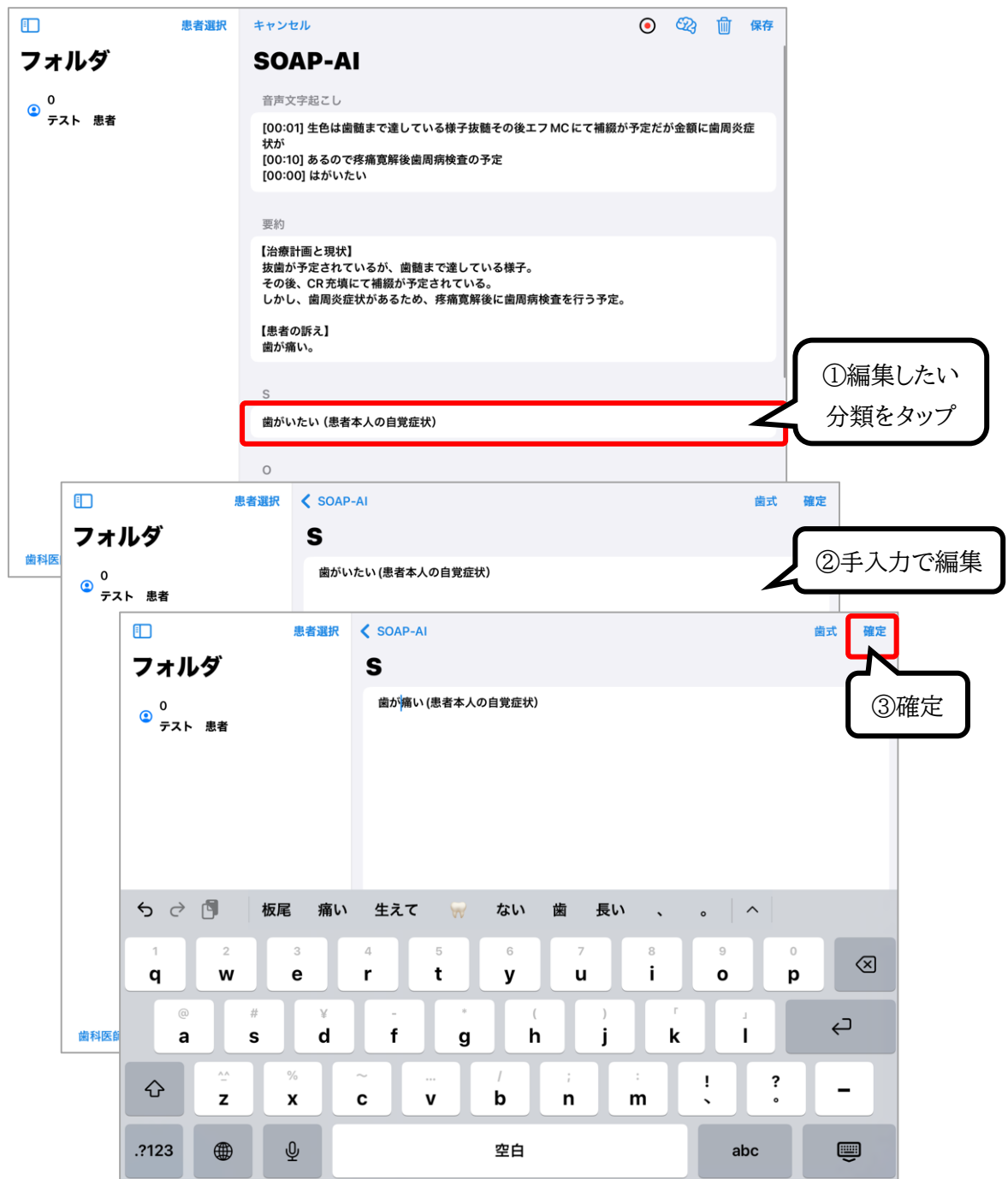

(オ) 内容に問題がなければ[保存]します。

※ [保存]前に[キャンセル]をタップした場合、録音・登録内容は破棄されます。


The screenshot shows the 'SOAP-AI' screen in a medical application. On the left is a sidebar with 'フォルダ' (Folder) and '0 テスト 患者' (0 Test Patient). The main area is titled 'SOAP-AI' and contains a '音声文字起こし' (Voice-to-text transcription) section with a timestamped log: '[00:01] 生色は歯髄まで達している様子抜髄その後エフMCにて補綴が予定だが金額に歯周炎症状が' and '[00:10] あるので疼痛寛解後歯周病検査の予定' and '[00:00] はがいたい'. Below this is a '要約' (Summary) section with '【治療計画と現状】' (Treatment plan and current status) and '【患者の訴え】' (Patient's complaint). At the bottom right, a red box highlights the '保存' (Save) button. The bottom status bar shows 'データサイズ 305.5 KB'.

2.3.2. カルテへ挿入

(ア) […>SOAP-AI]をタップし、挿入位置を選んでタップします。

The screenshot shows the 'カルテ' (Medical Record) screen. The left sidebar has 'カルテ編集' (Medical Record Edit) and '1 テスト 患者' (1 Test Patient). The main area is titled 'カルテ' and shows a date '2025年7月16日'. A red box highlights the '…>' button in the top right corner. A menu is open, showing options like 'ブロックを挿入する' (Insert block), '処置を挿入する' (Insert treatment), and 'SOAP-AI'. Red arrows point from the 'SOAP-AI' option in the menu to the '来院ブロックに挿入する' (Insert into visit block) and '処置部位ブロックに挿入する' (Insert into treatment area block) options. The bottom status bar shows '305点 負担金 ¥920'.

(イ) 挿入する内容を選択し、[挿入]します。

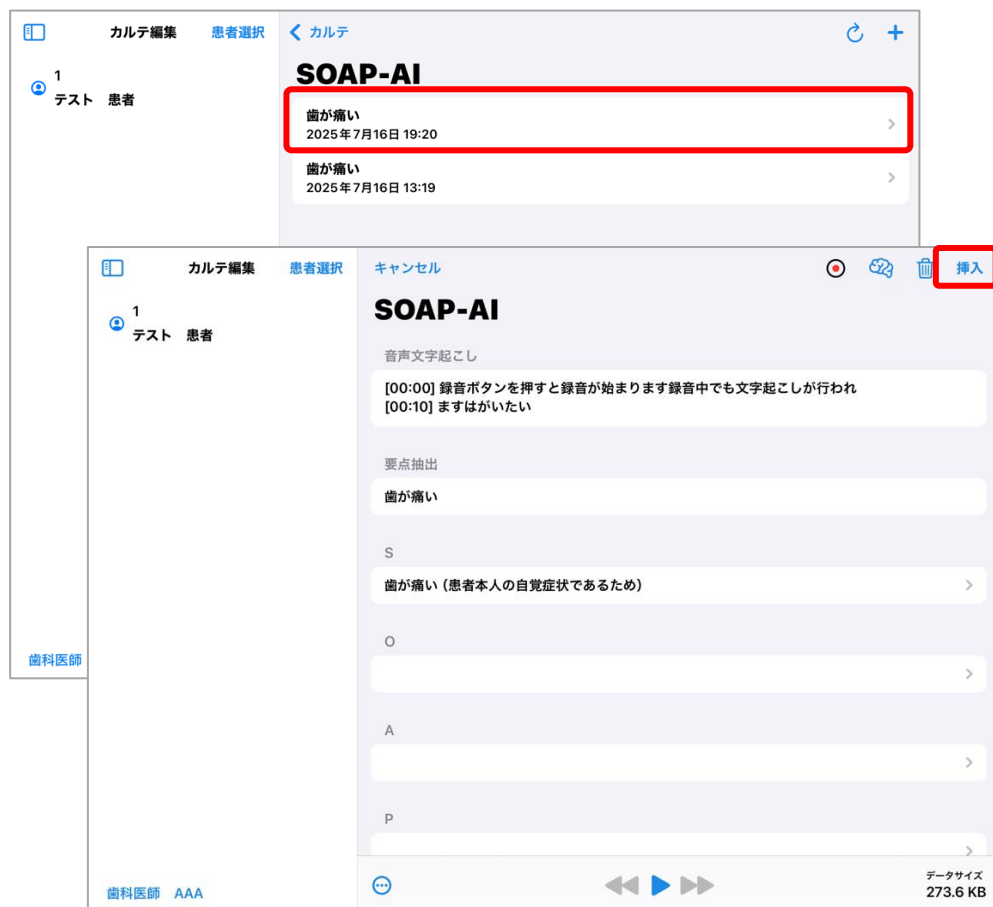

(ウ) (ア)で選んだ挿入位置に、SOAP コメントが挿入されます。



2.3.3. 作成した SOAP コメントを削除する

- (ア) 削除したい内容をタップし、削除アイコンをタップします。
- (イ) 確認メッセージが表示されるので、[削除]をタップします。

