

SOAP-AI

操作マニュアル

2026/5/25

(株)オプテック 運用技術部

内容

1. 概要.....	1
2. 操作.....	1
2.1. カルテ.....	1
2.2. カルテフォルダツールウィンドウ.....	4
2.3. さくっと One.....	5
2.3.1. SOAP コメントを作成する.....	5
2.3.2. カルテへ挿入.....	7
2.3.3. 作成した SOAP コメントを削除する.....	9

1. 概要

本ドキュメントでは、Opt.one3 で使用可能な「SOAP-AI」の操作について記載します(条件:ゴールドプラン以上のみ)。


さくっと One を使用している場合、さくっと One でも SOAP-AI を使用できます。

2. 操作

2.1. カルテ

(ア) [SOAP-AI]ボタンをクリックします。

※ [SOAP-AI]は<S>、<O>、<A>、<P><主訴><現症><問題リスト・考察><初期治療計画>入力画面で表示されます。

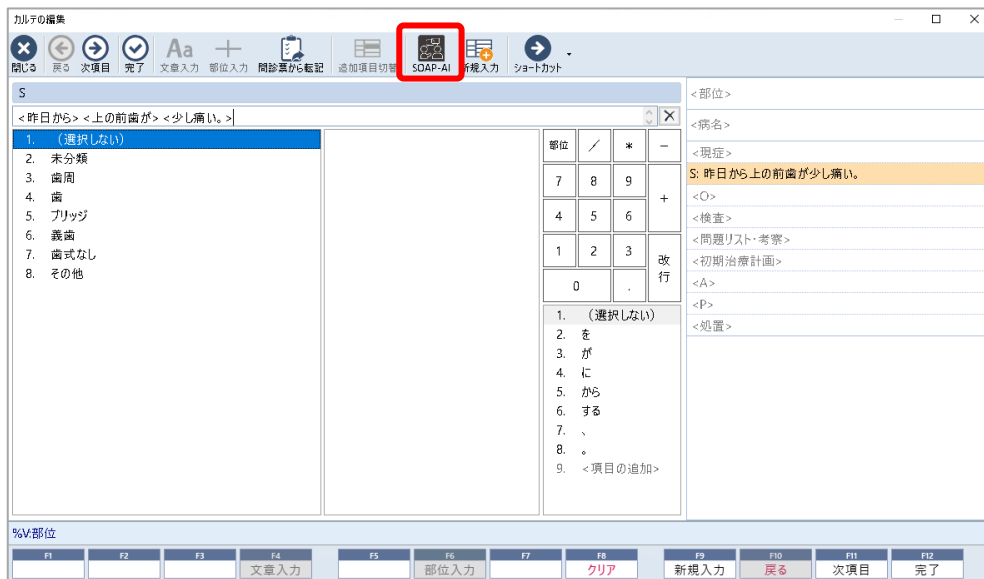


(イ) [SOAP-AI]画面が全画面で起動するので、[記録開始]を選択します。




(ウ) SOAP 挿入したい内容をテキスト/音声入力し、[次へ]をクリックします。

※ Windows11 の場合、[音声入力]が使用できます(PC ヘマイク接続が必要)。

※ 「。」や「改行」で区切るようにすると精度が向上します。

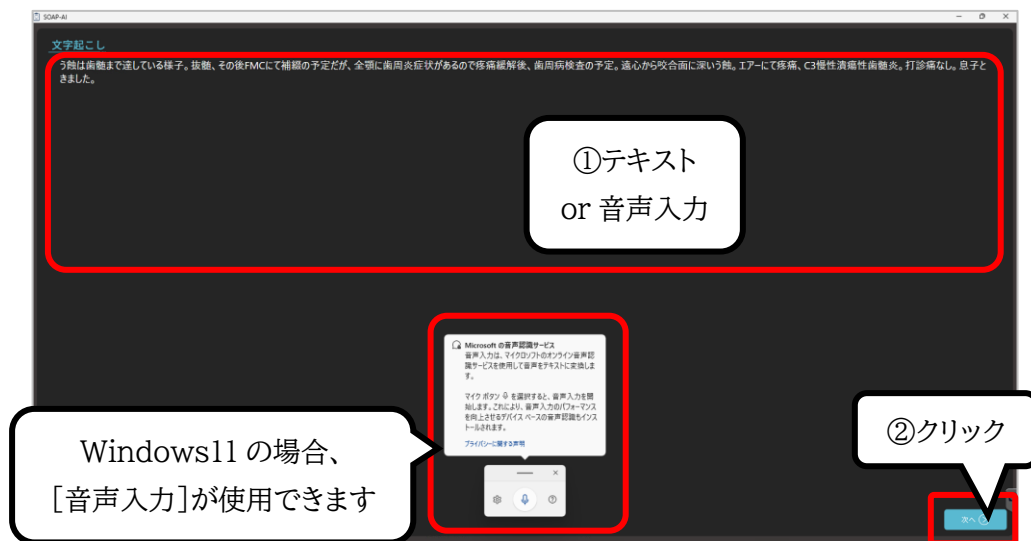


(エ) 要約、SOAP 分類が行われます。結果を確認し、どちらかの[カルテ転記]をクリックします。

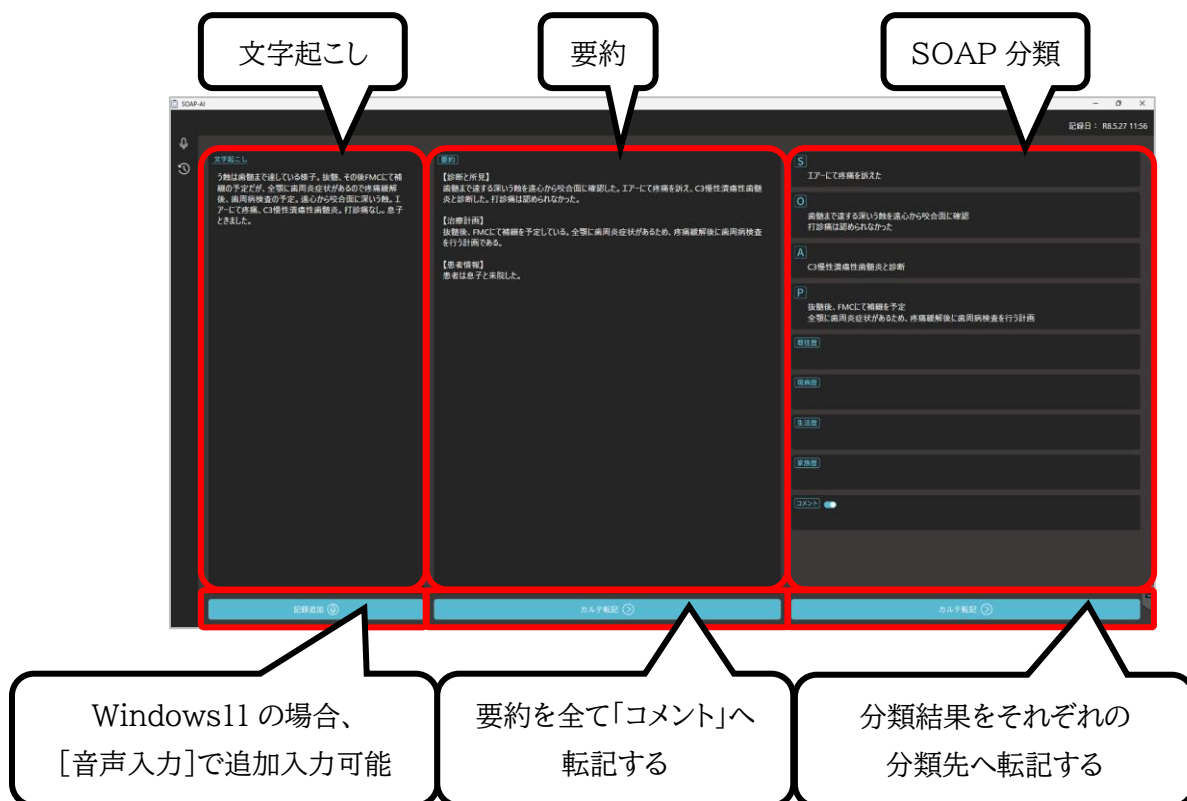

(オ) それぞれの分類に転記されます。

※ SOAP-AI 起動前に内容を入力していた場合、その後ろに挿入されます。


SOAP-AI 画面	転記先
S	S/主訴
O	O/現症
A	A/問題リスト・考察
P	P/初期治療計画
他	コメント

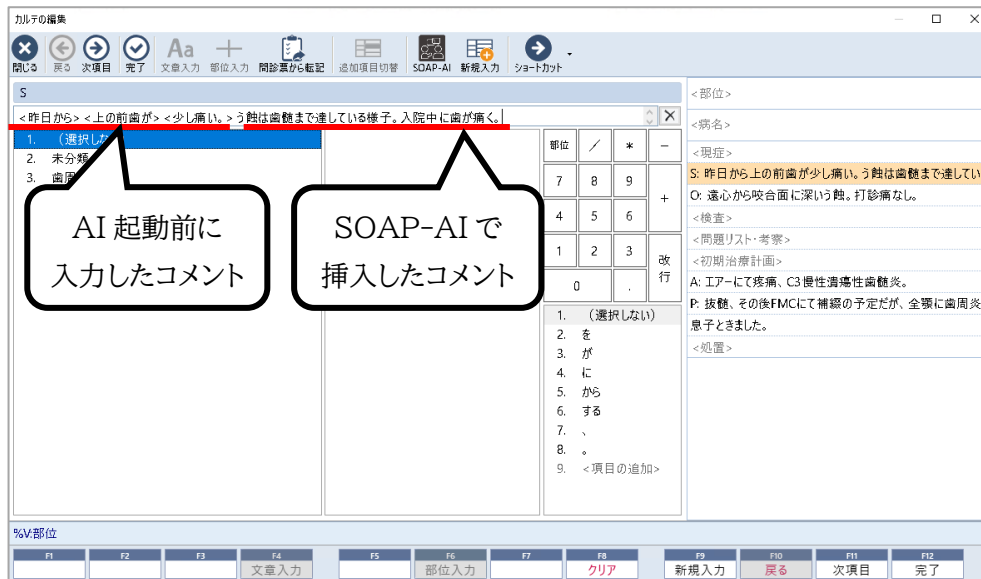

2.2. カルテフォルダツールウィンドウ


カルテでのみ、過去に保存した SOAP-AI の履歴を確認できます。編集はできません。開いた際、SOAP-AI を保存した日にカルテ移動します。

Opt.one/さくっと One 関係なく、すべての SOAP-AI 履歴を確認できます。

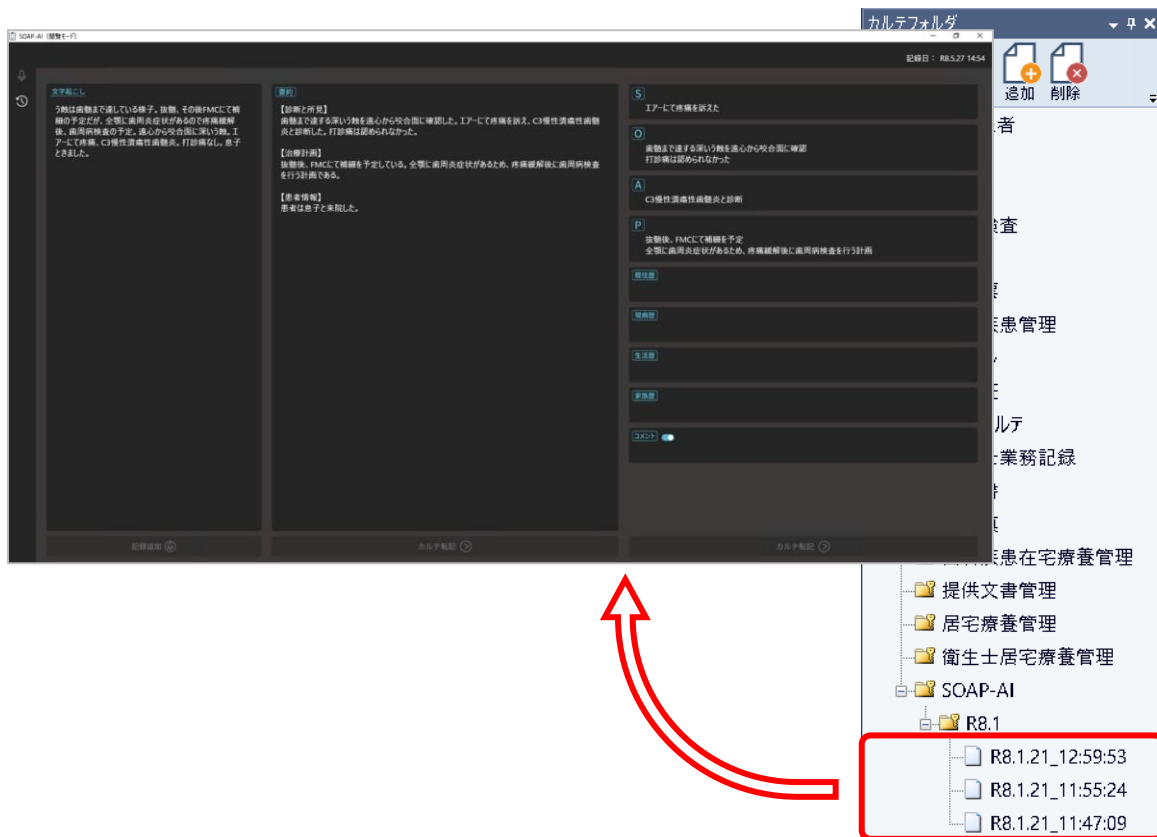

※ 履歴を削除する場合、左の履歴アイコンから一覧を開きます。

マウスカーソルを合わせると右上に[×]が表示されるので、クリックすると削除します。

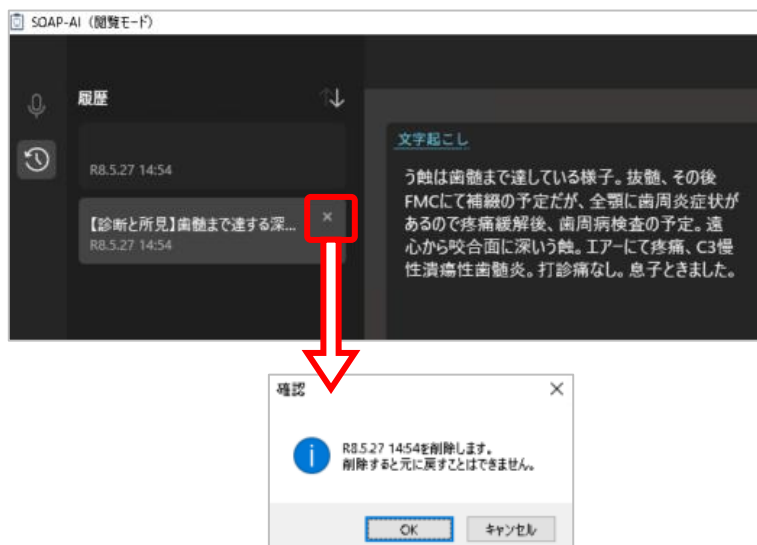


2.3. さくっと One

2.3.1. SOAP コメントを作成する

(ア) 左側のメニュー一覧から[SOAP-AI]をタップします。

(イ) 新しく作成する場合は右上[+]を、作成済みの内容を編集する場合は一覧から選択してタップします。

※ Opt.one で保存した内容も一覧に表示されます。

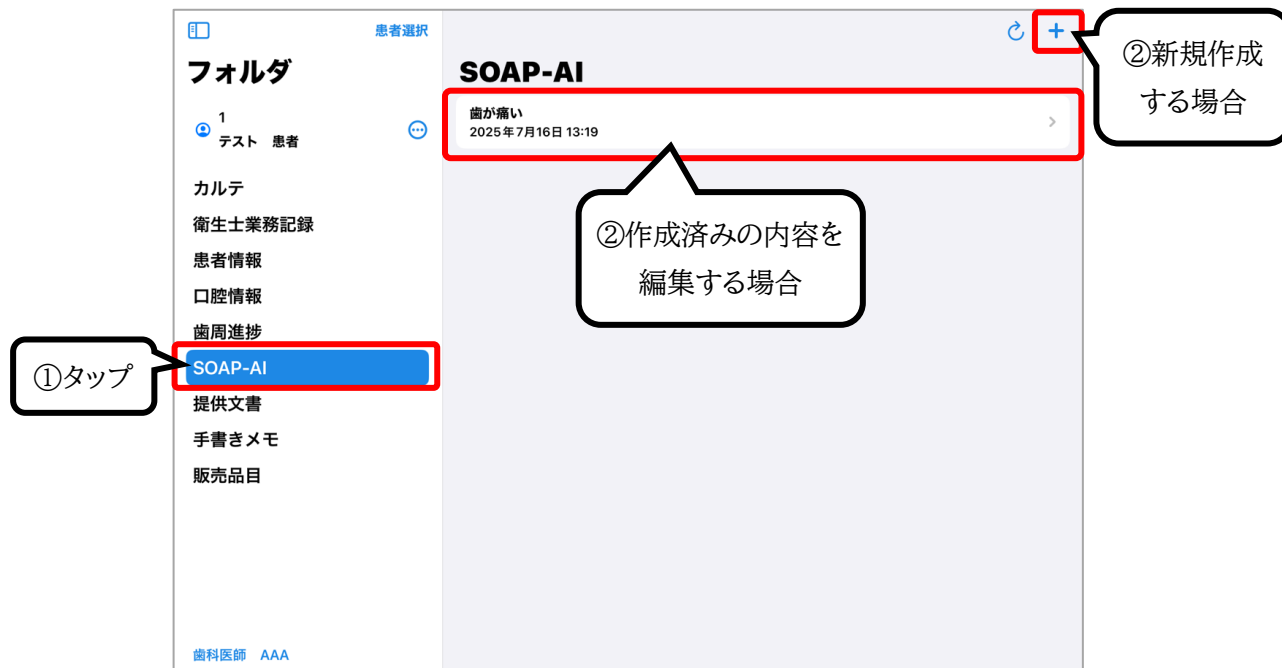

(ウ) 録音ボタンをタップして録音を開始・終了します。

音声は文字起こしされ、AIによる要約と分類が行われます。




(エ) 内容を確認し、修正があれば分類をタップして編集し、[確定]で変更内容を保存します。

The image illustrates the steps to edit a SOAP-AI entry in a mobile application. It consists of three overlapping screenshots:

- Top Screenshot:** Shows the 'SOAP-AI' screen with a list of symptoms. The text '歯がいたい (患者本人の自覚症状)' is highlighted with a red box. A callout bubble indicates: ①編集したい分類をタップ (Tap the classification you want to edit).
- Middle Screenshot:** Shows the text selected and a keyboard appearing. A callout bubble indicates: ②手入力編集 (Edit by hand input).
- Bottom Screenshot:** Shows the '確定' (Confirm) button highlighted with a red box. A callout bubble indicates: ③確定 (Confirm).

(オ) 内容に問題がなければ[保存]します。

※ [保存]前に[キャンセル]をタップした場合、録音・登録内容は破棄されます。

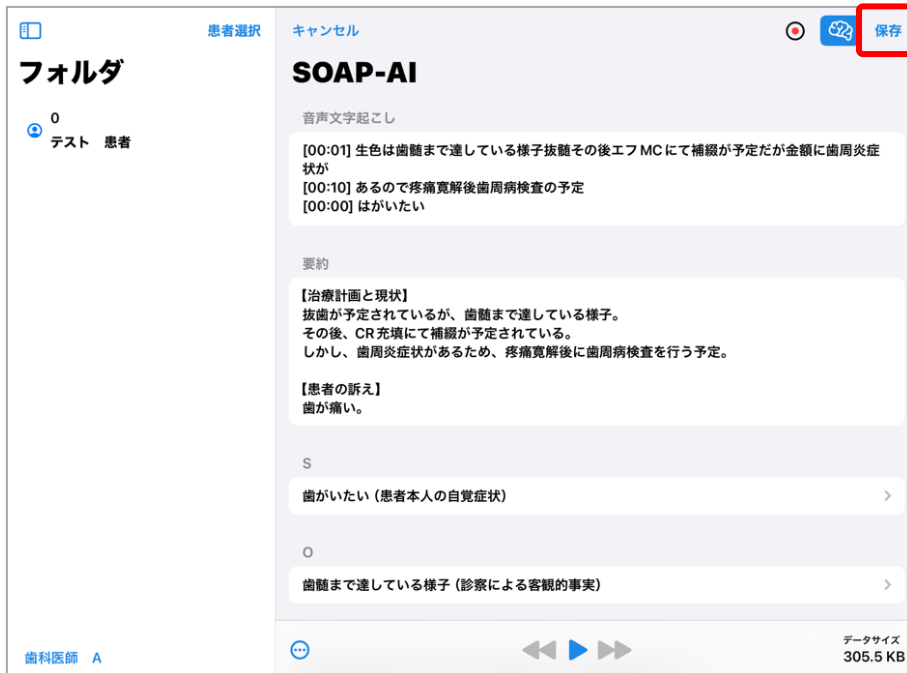


2.3.2. カルテへ挿入

(ア) […>SOAP-AI]をタップし、挿入位置を選んでタップします。



(イ) 挿入する内容を選択し、[挿入]します。

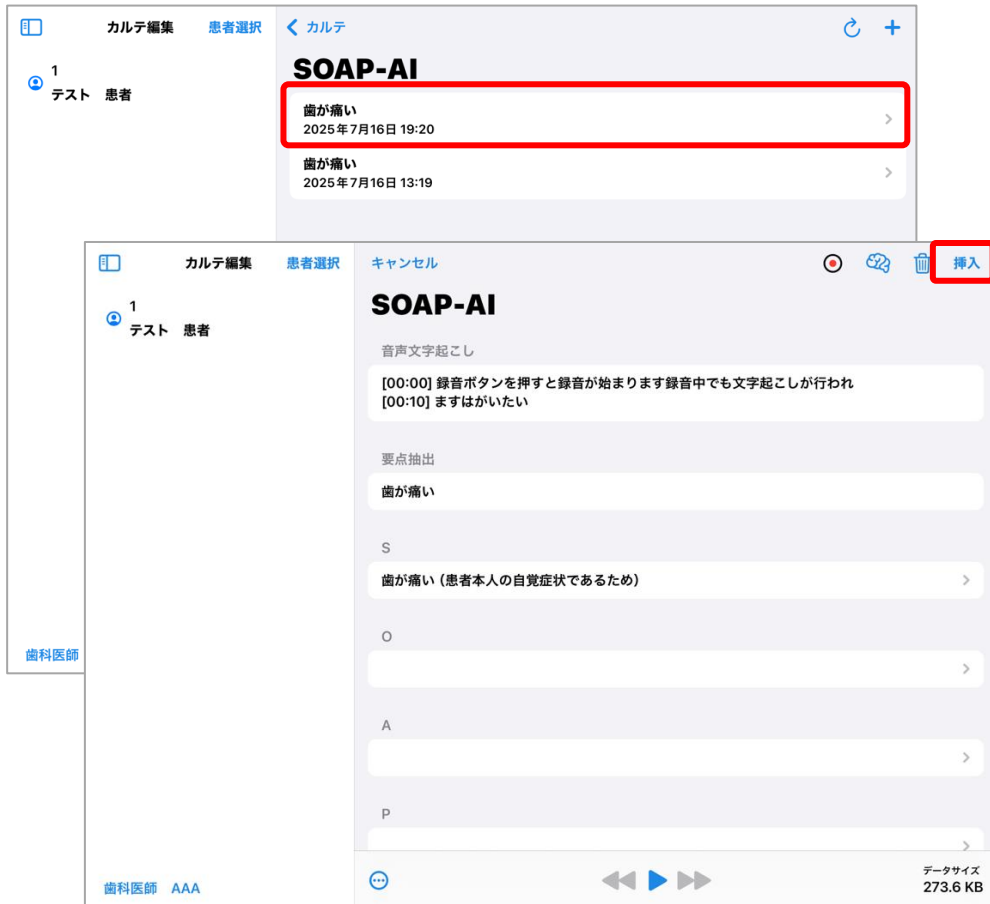

(ウ) (ア)で選んだ挿入位置に、SOAP コメントが挿入されます。



2.3.3. 作成した SOAP コメントを削除する

(ア) 削除したい内容をタップし、削除アイコンをタップします。

(イ) 確認メッセージが表示されるので、[削除]をタップします。

